

## DÉMARRER AVEC LIFECOMPANION



### Dans cette fiche, vous apprendrez à

- Télécharger le logiciel LifeCompanion
- Installer le logiciel
- Télécharger les prototypes
- Ouvrir un prototype

### Prérequis

- Aucun

### Pourquoi choisir LifeCompanion ?

LifeCompanion est un assistant numérique gratuit et open-source développé depuis 2015 par le Centre de Kerpape (centre de rééducation à Lorient, 56). Il est aujourd'hui majoritairement utilisé comme aide à la communication ou aide technique d'accès au numérique.

Le GNCHR a choisi LifeCompanion comme l'un des outils support pour la création du carnet MCPV après avoir testé et expérimenté d'autres outils de communication alternative augmentée.

### Les prérequis avant l'installation

Pour installer et utiliser le logiciel vous aurez besoin

- d'un ordinateur ou d'une tablette équipée du système Windows (toute version) relativement récent ayant au moins 2GB de mémoire vive (RAM) et 1GB d'espace disque disponible
- d'une connexion internet
- des droits d'administrateur sur le poste

LifeCompanion n'est actuellement **pas compatible** avec les systèmes Android (tablettes et smartphones Samsung, Huawei, Xiaomi, etc.), iOS (tablettes iPad ou smartphones iPhone) ou ChromeOS (Chromebook).

## TÉLÉCHARGER LIFECOMPANION

### Télécharger LifeCompanion



LifeCompanion est un logiciel gratuit, pour le télécharger, rendez-vous à l'adresse du site officiel

<https://lifecompanionaoc.org>


Et cliquez sur « Télécharger et installer » puis sur « Télécharger LifeCompanion pour Windows ».

Le fichier se téléchargera sur votre ordinateur dans le dossier « Téléchargement » sous le nom « LifeCompanion\_WINDOWS.exe »

## En cas de problème lors du téléchargement

Selon votre navigateur internet, vous pouvez rencontrer des blocages du téléchargement de LifeCompanion. Suivez alors les instructions suivantes.



1 - Identifiez l'icône indiquant un problème de téléchargement, celle-ci peut ressembler à

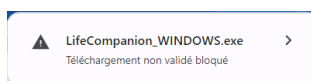

2 - Cliquez sur l'icône permettant d'avoir plus d'information



3 - Sélectionnez ensuite le choix permettant de valider le téléchargement, par exemple :  
« Télécharger le fichier non valide »  
« Conserver quand même »

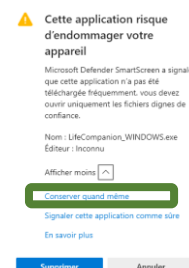
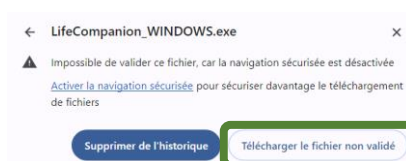


## INSTALLER LIFECOMPANION

Une fois le fichier « LifeCompanion\_WINDOWS.exe » téléchargé sur votre ordinateur, **double cliquez directement dessus pour lancer l'installation.**

Si l'image suivante apparaît, sélectionnez « Informations complémentaires » puis « Exécuter quand même ».


Il est également possible que certains antivirus détectent LifeCompanion comme un virus, vous pouvez ignorer cet avertissement. Si nécessaire, vous pouvez lire [la page de documentation pour configurer son antivirus pour LifeCompanion.](#)

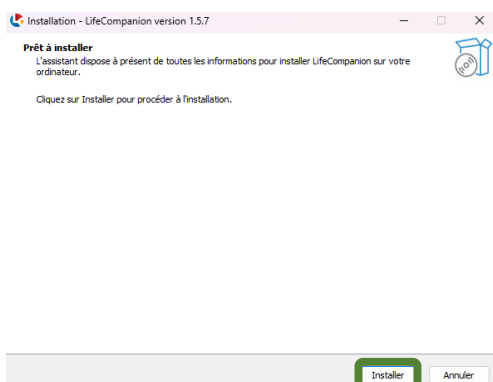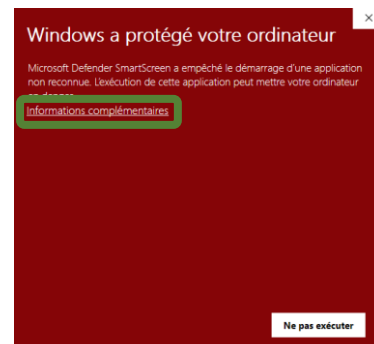


Cliquez ensuite sur « Installer »



Puis sur « Suivant »

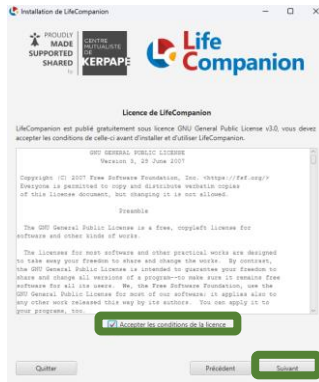

Cochez « Accepter [...] » puis sur « Suivant »



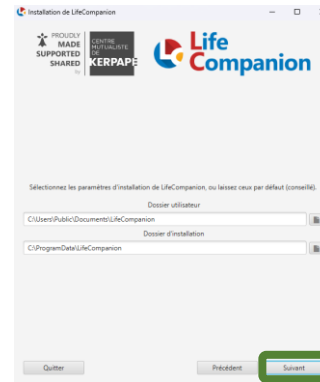


Et de nouveau sur « Suivant »

**Patientez le temps que le logiciel se télécharge et s'installe.** Cela peut prendre jusqu'à une dizaine de minutes selon la vitesse de votre connexion internet. Une fois l'installation terminée, **vous pouvez cliquer sur « Suivant » puis sur « Fermer et terminer ».** LifeCompanion est maintenant installé !

## LANCER LIFECOMPANION

Suite à l'installation, vous devez retrouver sur  **votre bureau une icône de lancement de LifeCompanion.** Le logiciel est également disponible  **dans le menu démarrer.**

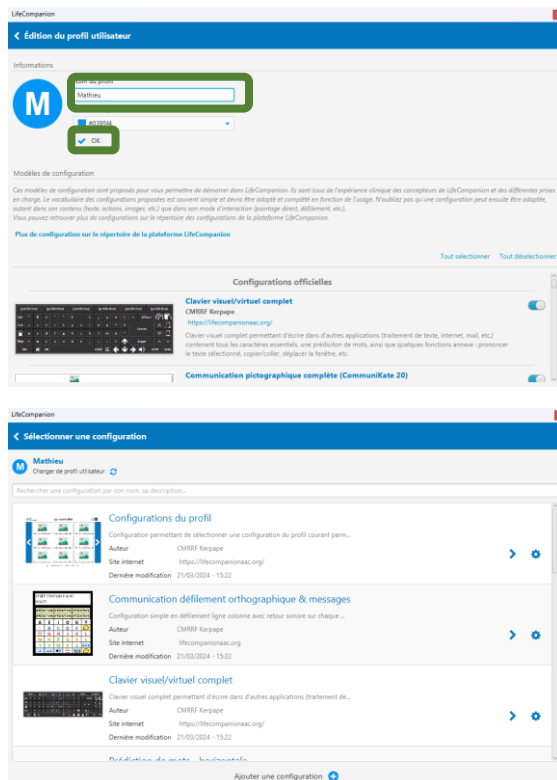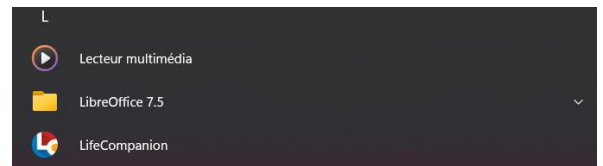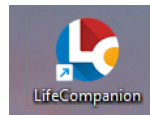

Lors du premier démarrage de LifeCompanion vous devrez créer un « Profil utilisateur ». Pour cela, entrez un nom dans « Nom du profil » puis cliquez sur « Ok ». Votre profil va alors s'initialiser.


Vous aurez alors accès à la « Liste des configurations » de votre profil. C'est dans cette liste que vous pourrez retrouver les futurs prototypes importés dans LifeCompanion. Vous pouvez maintenant fermer LifeCompanion pour télécharger des prototypes.


## AJOUTER UN PROTOTYPE


### Qu'est-ce qu'un prototype ?

Pour commencer à créer le Carnet Parcours de Vie, vous devez avoir téléchargé les prototypes (modèles de carnet), envoyés par le GNCHR. Vous avez dû recevoir un lien de téléchargement des prototypes.

Les prototypes sont des fichiers LifeCompanion au format « .lcc ». Ces fichiers ne seront utilisés que lors du démarrage du carnet ou plus tard pour la sauvegarde de celui-ci.


 MCPV prototype avec clavier.lcc  
Type : Fichier de configuration LifeCompanion

 MCPV prototype base.lcc  
Type : Fichier de configuration LifeCompanion

 MCPV prototype noir et blanc.lcc  
Type : Fichier de configuration LifeCompanion

### Intégrer un prototype

Afin de démarrer un carnet dans LifeCompanion, ouvrez le logiciel et suivez les étapes suivantes.

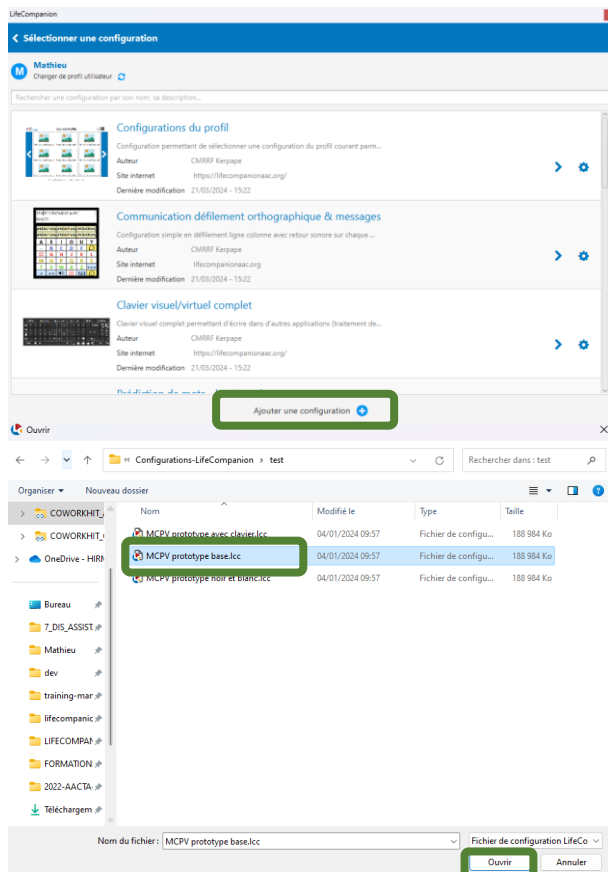


Lors du démarrage de LifeCompanion, celui-ci doit s'ouvrir sur la liste des configurations. Si ce n'est pas le cas, référez-vous à l'étape précédente pour initialiser votre profil.

Dans cette liste des configurations, **cliquez sur « Ajouter une configuration »** puis sur **« Importer une configuration »** dans la liste des choix proposés.

Une fenêtre va alors s'ouvrir pour vous proposer de choisir un fichier de configuration « .lcc ». Vous pouvez alors naviguer jusqu'au dossier dans lequel vous aviez précédemment stocké les prototypes et choisir le prototype qui vous correspond.

*Pour plus d'information concernant le choix du prototype, rendez-vous sur la fiche correspondante.*

## Ouvrir un prototype

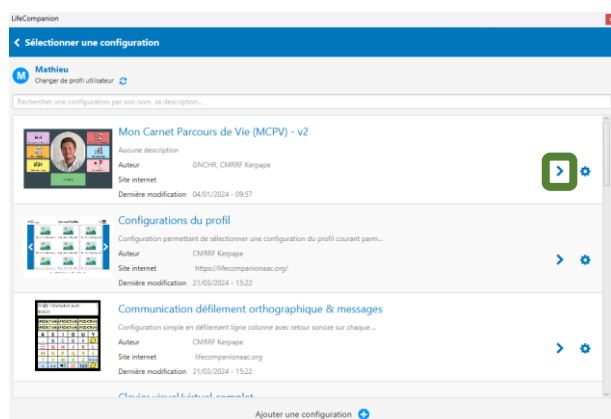


Une fois un prototype intégré dans LifeCompanion, celui-ci apparaît dans la liste de vos configurations.

Celui-ci sera directement stocké dans LifeCompanion, ce qui signifie que le fichier « .lcc » que vous avez sélectionné peut maintenant être supprimé.

Pour ouvrir votre carnet, vous **pouvez double cliquer sur la ligne de celui-ci ou sur la flèche bleue à droite de celui-ci**. Le prototype va alors s'ouvrir en « mode édition ».

## En cas de message à l'ajout d'un prototype

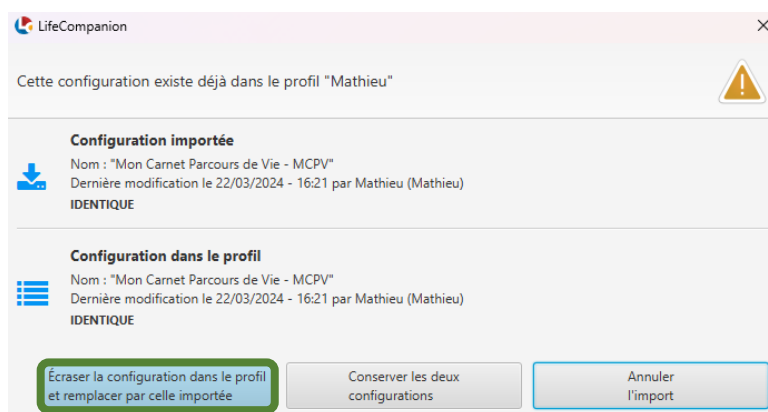

Dans LifeCompanion, les configurations sont identifiées de manière unique peu importe leur nom ou le nom du fichier. **Si vous importez une configuration déjà présente dans votre profil, un message apparaîtra alors pour connaître la configuration à conserver**. Cela peut également se produire si vous tentez d'importer deux fois le même fichier.

Ce message compare :


- **La configuration importée** : celle que vous essayez d'importer depuis le fichier « .lcc »
- **La configuration dans le profil** : celle déjà présente dans votre logiciel

De manière générale, **lorsque la configuration importée est plus récente que celle du profil, vous pouvez sélectionner « Écraser la configuration dans le profil et remplacer par celle importée »**. Sinon, vous pouvez aussi « Conserver les deux configurations » si vous ne souhaitez pas prendre de risque ou annuler l'import.

## Basculer entre les modes « utilisation » ou « édition »


Lorsque le prototype est ouvert dans LifeCompanion en « mode édition », vous pouvez lancer celui-ci de deux façons différentes :


- en cliquant sur le bouton « Utiliser » en haut à gauche dans l'onglet « Accueil »
- en cliquant sur la flèche bleue en bas à droite de la fenêtre du mode édition

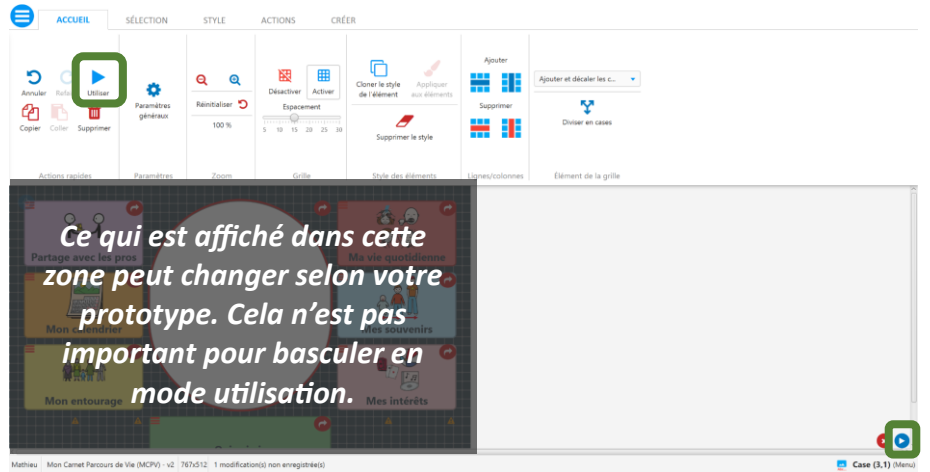


*Ce qui est affiché dans cette zone peut changer selon votre prototype. Cela n'est pas important pour basculer en mode utilisation.*

Peu importe l'affichage dans la zone de droite (menu, clavier, etc), cela fonctionnera.

Une fois en « mode utilisation », vous pouvez de nouveau basculer en « mode édition » en cliquant sur le petit rouage rouge  en haut à gauche de la fenêtre ou utilisant le raccourci clavier « CTRL + F5 ».

Vous pouvez également réduire la fenêtre ou basculer en plein écran en cliquant sur le bouton  en haut à droite.

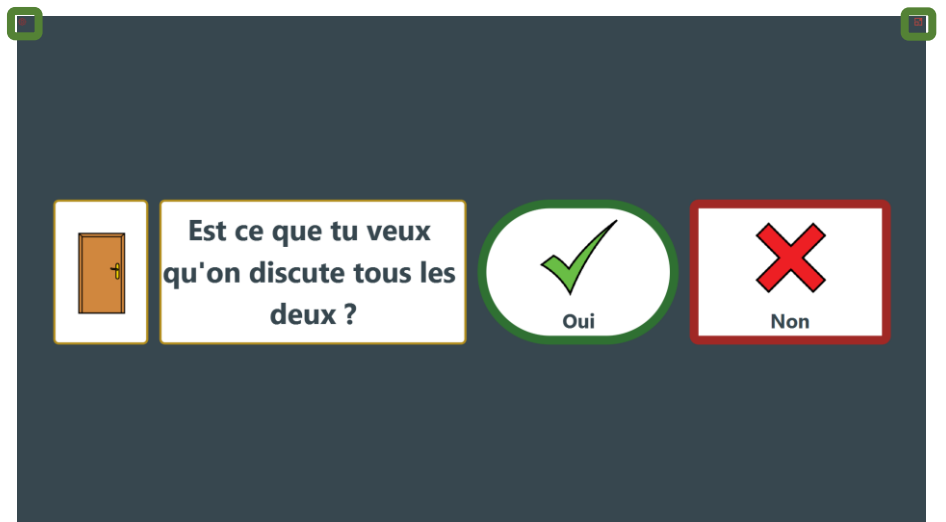

Vous êtes maintenant **prêt à utiliser et personnaliser votre carnet dans LifeCompanion** ! Pour aller plus loin et apprendre à choisir un prototype et le personnaliser, vous pouvez consulter les fiches correspondantes.